

AccuPAP™

Positive Airway Pressure Therapie-System



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Pulmodyne®



AccuPAP™

Das AccuPAP-System liefert einen positiven Atemwegsdruck zur Prävention und Behandlung von Atelektasen. In Verbindung mit einem Vernebler und einem T-Stück kann es auch zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform verwendet werden. Der einstellbare PEEP ermöglicht die Anpassung des Drucks an den Patienten. Die PEEP-Technologie ist dabei unabhängig vom Flow, sodass Sie den PEEP-Wert einstellen können, ohne den Flow zum Patienten zu verändern.

Verstellbares PEEP-Ventil


5/10/15/20cm H₂O

Anschluss für Sauerstoffschläuche

Flow eingestellt auf 8L/min

Lufteinzug aus der Umgebung

Mundstück

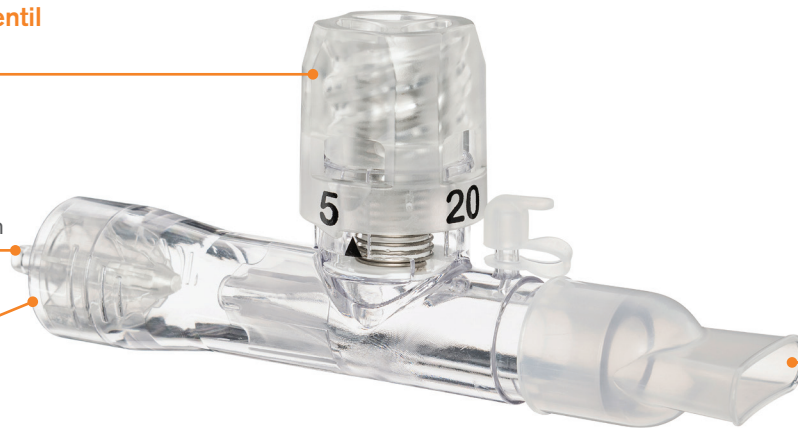

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-6000	AccuPAP mit Mundstück und Sauerstoffschlauch, 2.1m	10



Zubehör

Cirrus™2 Vernebler und Vernebler-Sets



Standard 22ID Anschluss

Für Masken, T-Stücke und Mundstücke

Schnellverschluss

Rasches Befüllen

Kalibrierter Verneblerbecher

Genau und schnelle Zubereitung

Geringes Residualvolumen

Weniger Medikamentenverlust

Artikelnr.	Produkt	Länge	VE
2605000	Cirrus2 Verneblerset zum Einbau in 22mm Beatmungssysteme, mit T-Stück & Schlauch	1.8m	40

Economy Anästhesie-Masken



Mit farbcodiertem Hakenring

Klares Gehäuse und Kissen

Gute Sicht auf den Patienten

In sieben Größen

Neonatal bis Erwachsene extragroß

Weiches Kissen

Patientenkomfort und luftdichter Sitz

Artikelnr.	Produkt	Gr.	VE
1517000	Economy Anästhesiemaske mit Hakenring, Erwachsene extragroß, 22ID	6	25
1516000	Economy Anästhesiemaske mit Hakenring, Erwachsene groß, 22ID	5	30
1515000	Economy Anästhesiemaske mit Hakenring, Erwachsene medium, 22ID	4	40
1514000	Economy Anästhesiemaske mit Hakenring, Erwachsene klein, 22ID	3	50



Bitte recyceln

IS10.40 • Issue 1 03.22